



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

IN-Line Port (Vascular Acces Ports parallel met de huis)



Specificaties

Model	IN-Line
Formaat & materiaal	medium, polysulfon
Diersoorten	primaten, honden, konijnen
Gewicht	3 g
Inhoud	0,17 cc
Hoogte	1 cm
Opening septum	0,8 x 0,5 cm
Voetafdruk	1,7 x 1,9 cm
Katheterconfiguratie	De poorten kunnen worden besteld met een vooraf bevestigde of een bevestigbare katheter (AC, die bevestigd wordt tijdens de ingreep)
Kathetermaterialen	De poorten kunnen worden besteld met een katheter van 2-9 Ch uit silicone, polyurethaan, Intisil (silicone met ronde tip) of Hydrocoat (polyurethaan met Hydromer-coating en ronde tip). Om complicaties te minimaliseren dient de kleinst mogelijke diameter te worden gebruikt.
Afkortingen kathetermaterialen	H - Polyurethaan katheter met Hydromer-coating en ronde tip I - Intisil silicone katheter met ronde tip PR - Polyurethaan katheter met ronde tip

Eigenschappen

InLine Port voorkomt 'loslopen' van de naald

De naald komt niet los wanneer het dier beweegt

Horizontale positie van de naald/infusieset parallel met de huid biedt betere naaldretentie



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Laag profiel, licht, biocompatibele vorm

vermindert het aantal gevallen van huidnecrose

Lineair vloeistofpad door de poort

om een infuuskatheter, sonde of geleidingsdraad door de poort en in het bloedvat in te brengen

Mogelijkheid om doorgankelijkheid te herstellen

door rechtstreeks door de poort en de katheter een afzonderlijke, kleinere *infuuskatheter in te brengen om toegang te krijgen tot het bloedvat

Gladde binnenkant

infusie & monsternamen met een *flexibele, knikbestendige infuuskatheter i.p.v. een stalen naald

De Infuuskatheter

Een infuuskatheter biedt tal van voordelen

geen herhaaldelijke operaties om verstopte katheters te vervangen, de naald raakt niet los wanneer het dier beweegt en de katheter blijft langer doorgankelijk


Bestelinformatie

Vermeld het catalogusnummer voor het model (InLine) en de katheterconfiguratie (vooraf bevestigd of bevestigbaar), de Franse maat, het materiaal en de tipconfiguratie die vereist zijn. Bijvoorbeeld: Het catalogusnummer voor een InLine poort met een polyurethaan katheter van 7 Ch met een stompe tip die tijdens de ingreep wordt bevestigd, is INLAC-7P. De katheters worden op verzoek voorzien van retentieringen en zijn 24"/60 cm lang, tenzij anders opgegeven. Informatie over de materialen en modificaties van de katheters vindt u verder in deze catalogus.

admin@carfil.be


Zijdellings aanprikken (parallel met de huid)

De hubernaald staat bij het inbrengen parallel aan het huidoppervlak.

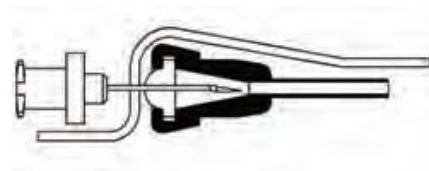

Klassieke inbrenghoek

de Hubernaald staat loodrecht op de huidoppervlak wanneer ze in het septum wordt ingebracht

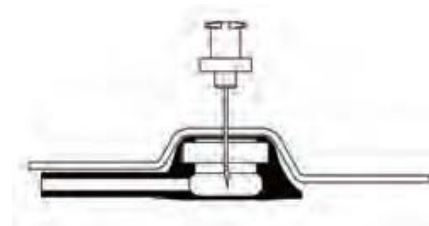

PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be