



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Gridlock (Dispositifs d'accès vasculaire à double usage) (kopie)



Spécifications

Modèle	IN-LINE
Taille et matériau	Medium, polysulfone
Applications	Primates, chiens, lapins
Poids	3 g
Volume	0,17 cc
Hauteur	1 cm
Ouverture du septum	0,8 x 0,5 cm
Encombrement	1,7 x 1,9 cm
Configuration du cathéter	Les chambres implantables peuvent être commandées avec cathéter préalablement fixé ou connectable/AC (à connecter pendant l'intervention chirurgicale).
Matériau du cathéter	Les chambres implantables peuvent être commandées en silicone, polyuréthane, Intisil (extrémité arrondie en silicone) ou Hydrocoat (cathéters en polyuréthane à revêtement Hydromer et à extrémité arrondie) dans une taille du 2 à 9 Charrière. Afin de réduire les complications, il faut utiliser le diamètre le plus petit possible
Codes matériaux du cathéter	H - Cathéter en polyuréthane à revêtement Hydromer et à extrémité arrondie I - Cathéter en silicone Intisil à extrémité arrondie PR - Cathéter en polyuréthane à extrémité arrondie

Caractéristiques

Dispositif IN-Line empêche l'aiguille de « sortir »

Empêche l'aiguille de « sortir »



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

L'accès parallèle à la peau favorise un meilleur maintien de l'aiguille, en raison du positionnement horizontal de l'aiguille/du set de perfusion

Forme à profil bas, légère et biocompatible

Réduit la fréquence des nécroses cutanées

Circulation linéaire dans le dispositif

Pour la progression d'un cathéter pour perfusion, d'une sonde ou d'un fil guide à travers la chambre implantable et à l'intérieur du vaisseau

Capacité de restauration de la perméabilité

Par l'insertion d'un cathéter pour perfusion distinct et plus petit * directement à travers la chambre implantable et le cathéter pour accéder au vaisseau

Surface intérieure lisse

Offre l'option de perfusion et d'échantillonnage à travers un cathéter flexible* résistant aux déformations au lieu d'une aiguille en acier

Le cathéter pour perfusion

L'utilisation d'un cathéter pour perfusion offre un certain nombre d'avantages


Il permet d'éviter les interventions chirurgicales répétées pour remplacer un cathéter obstrué, d'éliminer le problème de l'aiguille qui « sort » et d'améliorer la durée de la perméabilité

Informations de commande

Utilisez le numéro du catalogue pour le modèle In-LINE, la configuration de cathéter (préalablement fixé ou connectable), la taille en Charrière, le matériau et la configuration d'extrémité requis. Exemple : le numéro du catalogue pour une chambre implantable In-LINE avec un cathéter en polyuréthane à extrémité émoussée de 7 Charrière qui doit être fixé pendant l'intervention chirurgicale est INLAC-7P. Des perles de rétention de suture seront placées sur les cathéters si nécessaire. La longueur du cathéter sera de 24 "/60 cm, sauf spécification différente. Voir plus loin dans ce catalogue pour plus d'informations sur les matériaux et modifications des cathéters. admin@carfil.be

Dispositif d'accès parallèle à la peau/latéral

L'aiguille de Huber, une fois insérée dans le septum, est parallèle à la surface de la peau

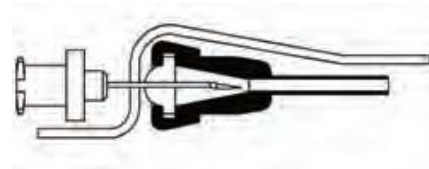

Accès conventionnel par le dessus

L'aiguille de Huber, une fois insérée dans le septum, est perpendiculaire à la surface de la peau




PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

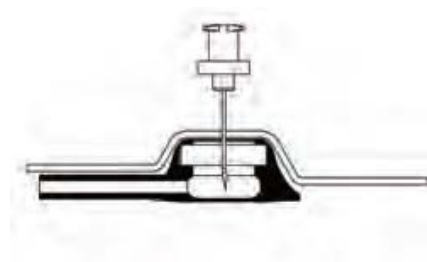

PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be